Кафедра квантовой радиофизики и электроники Отчет по лабораторной работе $\mathbb{N}1$

Исследование твердотельных структур методом ЭПР-спектроскопии

Выполнили студенты 440 группы Виноградов И.Д., Понур К.А., Шиков А.П.

1. Теоретическая часть

В данной работе проводится исследование спектров поглощения ЭПР двух твердотельных структур: свободного радикала **дифенила** и парамагнитного кристаллического вещества – **рубина**. Рассмотрим качественную картину спектров данных образцов.

Дифенил представляет собой сложную по своей структуре молекулу с молярным весом в 518, имеющую один неспаренный электрон. Его парамагнетизм обусловлен спиновым моментом неспаренного электрона. У дифенила будет наблюдаться только один резонансный переход, и сигнал ЭПР будет представлять собой одиночную резонансную линию.

Рубин представляет собой кристалл корунда Al_2O_3 , в котором часть ионов Al^{3+} замещена парамагнитными ионами Cr^{3+} с суммарным спином $S=\frac{3}{2}$. Результирующий ЭПР-спектр рубина определяется числом разрешенных резонансных переходов, для которых выполняется соотношение $E_m-E_{m'}=\hbar\omega$. Разрешенными переходами будут такие, для которых матричный элемент дипольного момента $\mu_{mm'}$ не равен 0. В конечном счете, вычисление матричного элемента $\mu_{mm'}$ сводится к следующему:

$$\mu_{mm'} = \frac{g\beta_B}{\hbar} \langle m|\hat{S}_x|m'\rangle \tag{1}$$

Для его вычисления используют операторы повышения и понижения

$$\hat{S}_{+} = \hat{S}_{x} + i\hat{S}_{y};$$
$$\hat{S}_{-} = \hat{S}_{x} - i\hat{S}_{y}$$

Заменяя в (1) оператор \hat{S}_x на $\frac{\hat{S}_+ + \hat{S}_-}{2}$ можно убедиться в том, что отличными от нуля будут только матричные элементы вида $\langle m|\hat{S}_x|m\pm 1\rangle$. Следовательно, резонансные переходы разрешены только между теми уровнями, квантовые числа m которых различаются на ± 1 . Всего таких переходов в кристалле рубина – три.

1.1. Условия выделения кривых и дисперсии на детекторе

Волноводный отражательный резонатор с отверстием связи можно представить в виде эквивалентного колебательного контура, импеданс которого определяется выражением

$$Z = R + i[\omega L_0 - \frac{1}{\omega C}],$$

где R, L_0 и – эквивалентные сопротивление, индуктивность и ёмкость соответственно. При наличии парамагнетика с магнитной проницаемостью μ индуктивность резонатора будет

записывать как $L = \mu L_0$. При частичном заполнении резонатора образцом магнитная проницаемость выражается через восприимчивость χ следующим образом

$$\mu = 1 + 4\pi\eta\chi$$

где χ – коэффициент заполнения резонатора парамагнетиком. В результате получаем

$$Z = R + i\frac{L_0}{\omega} \left(\omega^2 - \frac{1}{L_0 C}\right) + i\omega L_0 \cdot 4\pi \eta \chi.$$

Величина $\frac{1}{\sqrt{L_0C}}$ дает собственную частоту резонатора. При резонансе $\omega^2=\frac{1}{L_0C}=\omega_0^2$ и выражение для Z принимает вид

$$Z = R + i\omega L_0 \cdot 4\pi \eta \chi = R(1 + i4\pi \eta \chi' Q + 4\pi \eta'' Q),$$

где $Q = \frac{\omega L_0}{R}$ - добротность резонатора. Если обозначить характеристическое сопротивление волновода через Z_0 , то комплексный коэффициент отражения от резонатора Γ , определяемый как отношение амплитуды падающего на резонатор поля E_n к амплитуде отраженного поля, будет равен

 $\Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0}$

С учётом этого отраженную от резонатора сигнальную волну в точке детектирования можно записать в виде

$$E_1 = |E_n| \cdot \Gamma \cdot e^{-i4\pi \frac{L_1}{\lambda}},$$

где L_1 – длина волноводного плеча от детектора до резонатора. Кроме этой волны на детектор поступает сигнал, отраженный ль балансного плеча

$$E_2 = \alpha^2 |E_n| e^{-i4\pi \frac{L_2}{\lambda}},$$

где α - коэффициент ослабления аттенюатора, а L_2 - соответствующая длина балансного плеча. Суммарное поле на детекторе получим в следующем виде:

$$E = |E_n| \cdot e^{-i4\pi \frac{L_1}{\lambda}} \cdot \left\{ \Gamma + \alpha^2 e^{-i4\pi \frac{L_2 - L_1}{\lambda}} \right\}.$$

При малых уровнях СВЧ-мощности ток детектора пропорционален квадрату напряженности поля E в этом случае имеем

$$i_{\text{дет}} = S|E|^2 = SP_n \cdot \left|\Gamma + \alpha^2 e^{-i4\pi \frac{L_2 - L_1}{\lambda}}\right|^2,$$

где S – коэффициент преобразования детектора, а P_n – мощность, падающая на резонатор. Используя неравенства $\chi' \ll 1$, $\chi'' \ll 1$ и условие хорошей согласованности волновода с резонатором, получаем вид сигнала ЭПР:

$$i_{\text{дет}} = SP_n \cdot 4\pi Q \eta \left[\chi'' \cos\left(\frac{4\pi}{\lambda}\Delta L\right) - \chi' \sin\left(\frac{4\pi}{\lambda}\Delta L\right) \right]$$
 (2)

Отсюда следует, что в зависимости от положения замыкающего поршня балансного плеча сигнал на выходе детектора может быть пропорционален либо χ' , либо χ'' . При разности $\Delta L = L_2 - L_1$, кратной $\frac{\lambda}{4}$, ток детектора будет пропорционален χ'' , а при дополнительном сдвиге на $\frac{\lambda}{8}$ – пропорционален кривой χ' .

1.2. Определение числа парамагнитных частиц в образце

Чтобы получить соотношение, позволяющее определить число парамагнитных частиц исходя из характеристики наблюдаемого сигнала ЭПР, воспользуемся выражением (2). При $\Delta L \simeq \frac{\lambda}{4}$ имеем

$$i_{\text{дет}} \simeq SP_n \cdot 4\pi Q\eta \chi''$$
.

Введем технический коэффициент A, характеризующий коэффициент усиления тракта «детектор-усилитель-осциллограф». Его величину можно измерить, подавая известный по величине модулированный СВЧ-сигнал на детекторную головку и измеряя при этом амплитуду видеосигнала на экране осциллографа. Если обозначить через L_M высоту видеосигнала модуляции на экране, а P_M – величину модулированной компоненты СВЧ-мощности, то коэффициент усиления A будет равен $\frac{L_M}{P_M}$. Если учесть такого рода амплитудную калибровку, высота сигнала ЭПР на экране осциллографа может быть записана как

$$L_C = AP_n \cdot 4\pi Q \eta \chi''(\omega_0) \tag{3}$$

Коэффициент заполнения η определяется как отношение двух интегралов вида $\int H_1^2 d\nu$ по объему образца и резонатора соответственно. В условиях данной ЭПР-установки с достаточной степенью точности можно считать

$$\eta \simeq rac{2V_{
m o 6p}}{V_{
m pe 3}}.$$

Значение χ'' для малых полей H_1 при $\omega=\omega_0$ можно записать в виде

$$\chi''(\omega_0) = \frac{N_0 \mu^2}{3KT} \omega_0 T_2^*$$

Отсюда количество парамагнитных частиц можно оценить как

$$N_0 = 3KT \frac{\chi''(\omega_0)}{\mu^2 \omega_0 T_2^*}.$$
 (4)

Сопоставляя (3) и (4) получаем окончательно

$$N_0 = \frac{3KT}{8\pi Q\mu^2 \omega_0 T_2^*} \cdot \frac{L_C}{L_M} \cdot \frac{P_M}{P_n} \cdot \frac{V_{\text{pes}}}{V_{\text{ofp}}}$$

$$\tag{5}$$

2. Экспериментальная часть

2.1. Исследование ЭПР в молекулах дифенила

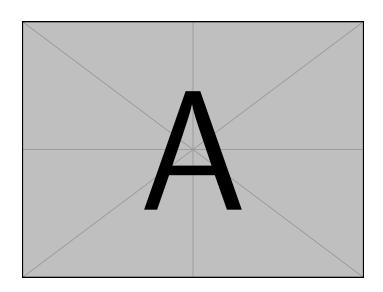


Рис. 1: Принципиальная схема установки

Получение на экране осциллографа кривых поглощения и дисперсии сигнала ЭПР. Для исследования ЭПР в молекулах дифенила, образец был помещен в резонатор, и произведена первоначальная настройка установки. Клистронный генератор был настроен на центр одной из зон по максимуму мощности ($\nu = 8.96$ ГГц при $\alpha = 0$), а резонаторная камера была настроена в резонанс (соотв. минимуму сигнала при $\alpha = 1$).

При подключенном к выходе детектора был включен источник постоянного тока для магнитных катушек. Поле H_0 было выведено на резонансное значение $H_0 = 3547$ Гс (при значении тока $I_0 = 160$ мА). Момент резонанса был определен по характерной наблюдаемой осциллограмме (см. рис. 2(a)).

Для получения кривых χ' и χ'' , в соответствии с формулой (2) (при $\alpha=0$) перемещался плунжер балансного плеча. Полученные осциллограммы приведены на рис. 2(б,в).

Измерение ширины линий поглощения сигнала ЭПР в единицах поля. Для получения ширины линии, шкала осциллографа была проградуирована по единицам поля $(21.88~\Gamma c/\kappa \pi)$. Ширина линии поглощения χ'' на половине высоты

$$\delta H = 10.9 \; \Gamma c.$$

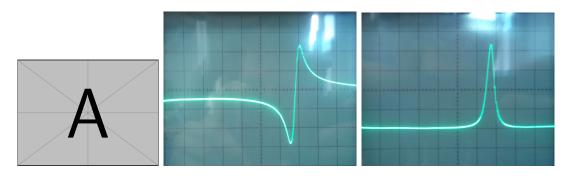


Рис. 2: Характерная осциллограмма при ЭПР(а), кривая χ' (б), кривая χ'' (в)

Расчет ширины линии в единицах частоты. Условие парамагнитного резонанса при S=1/2 имеет вид

$$\hbar\omega = g\beta_B H,\tag{6}$$

где g — фактор спектроскопического расщепления (для свободных электронов дифенила полагаем его равным 2), $\beta_B = |e|\hbar/(2m_ec)$ — магнетон Бора. Из (6) следует, что зная ширину линии поглощения к единицах поля мы можем однозначно восстановить ширину в единицах частот.

Получаем:

$$\delta\omega = 0.18 \cdot 10^9$$
 $\frac{\text{рад}}{c}$

Время поперечной релаксации тогда равно

$$T_2^* = \frac{2}{\delta \omega} = 1 \cdot 10^{-8} \text{ c} = 10 \text{ нc}.$$

Определение числа парамагнитных частиц в образце. Для вычисления числа парамагнитных частиц, воспользуемся пунктом 1.2 теории и формулой (5).

$$N_0 = \frac{3KT}{8\pi Q \mu^2 \omega_0 T_2^*} \cdot \frac{L_C}{L_M} \cdot \frac{P_M}{P_n} \cdot \frac{V_{\text{pes}}}{V_{\text{ofp}}},$$

где T_2^* — время поперечной релаксации, K — постоянная Больцмана, μ — магнитная проницаемость дифенила,

Свыше нам даны следующие величины:

$$Q = 5000, \quad \frac{V_{\text{pe3}}}{V_{\text{ofp}}} \simeq 200, \quad \frac{P_M}{P_n} = 1$$

Из эксперимента остается определить собственную частоту резонатора ω_0 (нашли в 2.1.3), время поперечной релаксации T_2^* и отношение L_C/L_M (нашли двумя параграфами выше).